

yazaki

快護
介適

たちあっぷ® サムリング




Support your life



写真は「サムリング (CKM-02)」とオプション品「ベッドでとまるくん (CKM-CK)」の設置例です。

●ベッドでとまるくん
サムリングをベッドで使用する際に
安定性を向上させるオプション品です。

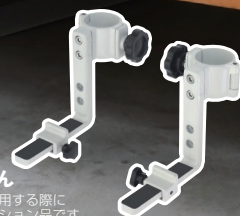


ここがスゴい! サルリング




ポイント 1 インテリアになじむ、おしゃれなデザイン

●マットカラー5色

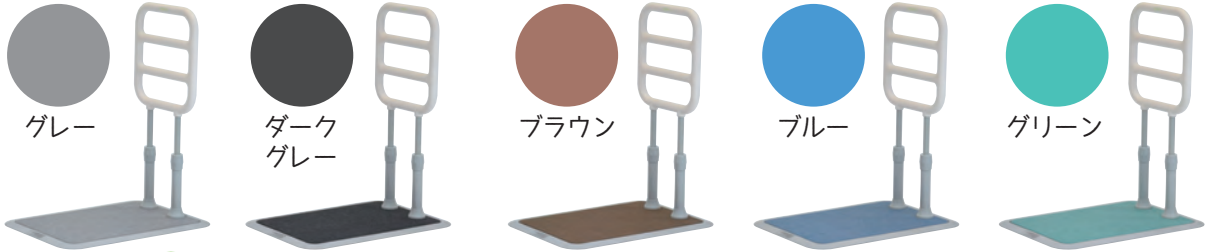

ポイント 2 使いやすい様々な安心機能

●ソフトでにぎりやすいディンプル付

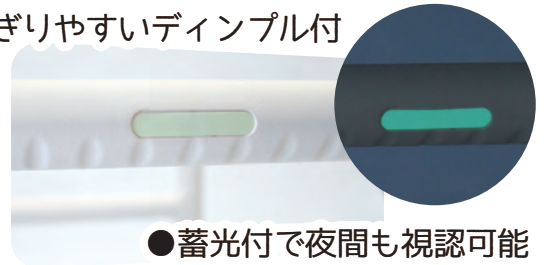

高さMAX
90cm

●高さ調整も可能
(80・85・90cm)

●ベースの縁は、つまずきにくい、
なだらかなスロープ形状



●ベースのうら側は
すべり止め付



72.5×50.5cm

●どこにも置ける
小さいベース

ポイント 3 簡単な組立と高さ調整

●運びやすいベース



●工具レスで組立簡単

●高さ調整も部品の
位置を変えるだけ



設置時の
うれしいポイント

サレリングのある生活




利用場面に合わせてお選びいただけるよう3タイプをご用意いたしました。




最大利用者体重100kg

品番

CKM-02

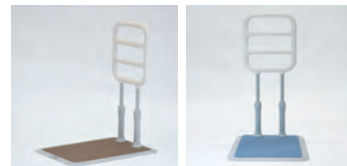

ソファやベッドからの立ち上がり補助をはじめ、立位保持・動作補助に使用できます。部屋や廊下に置いて、壁付け手すりまでの歩行補助にも使用できるスタンダードタイプです。

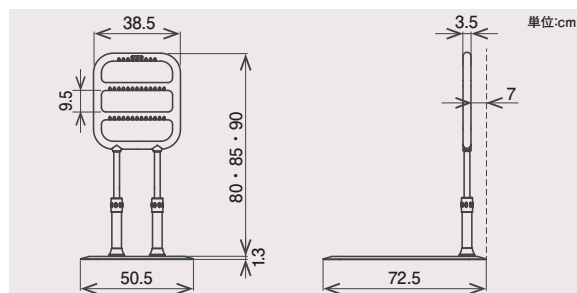


最大利用者体重100kg

品番

CKM-02W



両サイドの手すりにつかまりプッシュアップをすることで安全に立ち上がることができます。また、低い段差の昇降にも安心して使用することができます。

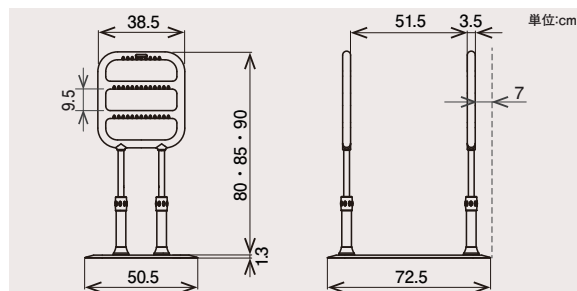


最大利用者体重100kg

品番

CKM-04



ベッドでは転落防止サイドレールと立ち上がり補助手すりの兼用として。また、壁に取り付けた手すりまでの導線確保としての手すりや廊下での歩行補助としても使用できます。

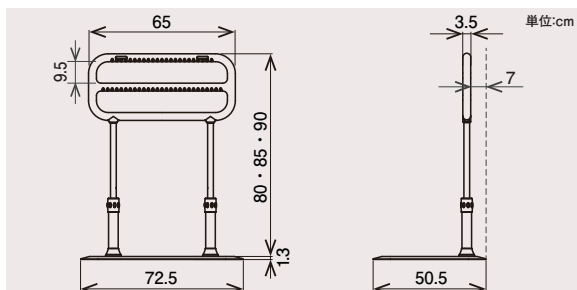

サムリング製品一覧

◎ 標準希望小売価格は、オープンプライスです。

●サムリング本体

※マットカラー：GR(グレー)・DGR(ダークグレー)・BR(ブラウン)・B(ブルー)・G(グリーン)

サムリング (CKM-02)					
品番	CKM-02 SET GR	CKM-02 SET DGR	CKM-02 SET BR	CKM-02 SET B	CKM-02 SET G
手すりサイズ / ベースサイズ	手すりサイズ：太さ φ35、幅 38.5cm、高さ(ベース厚みを除く) 80・85・90cm (5cm間隔3段階) / ベースサイズ：間口 50.5×奥行 72.5×厚み 1.3cm				
質量	17.5 kg				
材質	手すりフレームセット：(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)ナイロン樹脂 ベースセット：(ベース板 表面)スチール、(その他)ナイロン樹脂・ポリウレタン樹脂 マット：(表面)ポリエステル樹脂 (吸着部分)アクリル樹脂				
JANコード	4979652620569	4979652620545	4979652620552	4979652620576	4979652620583
TAISコード	00055-000302	00055-000303	00055-000304	00055-000305	00055-000306

サムリング (CKM-02W)					
品番	CKM-02W SET GR	CKM-02W SET DGR	CKM-02W SET BR	CKM-02W SET B	CKM-02W SET G
手すりサイズ / ベースサイズ	手すりサイズ：太さ φ35、幅 38.5cm、高さ(ベース厚みを除く) 80・85・90cm (5cm間隔3段階) / ベースサイズ：間口 50.5×奥行 72.5×厚み 1.3cm				
質量	22.0 kg				
材質	手すりフレームセット：(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)ナイロン樹脂 ベースセット：(ベース板 表面)スチール、(その他)ナイロン樹脂・ポリウレタン樹脂 マット：(表面)ポリエステル樹脂 (吸着部分)アクリル樹脂				
JANコード	4979652620620	4979652620606	4979652620613	4979652620637	4979652620644
TAISコード	00055-000308	00055-000309	00055-000310	00055-000311	00055-000312

サムリング (CKM-04)					
品番	CKM-04 SET GR	CKM-04 SET DGR	CKM-04 SET BR	CKM-04 SET B	CKM-04 SET G
手すりサイズ / ベースサイズ	手すりサイズ：太さ φ35、幅 65cm、高さ(ベース厚みを除く) 80・85・90cm (5cm間隔3段階) / ベースサイズ：間口 50.5×奥行 72.5×厚み 1.3cm				
質量	18.0 kg				
材質	手すりフレームセット：(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)ナイロン樹脂 ベースセット：(ベース板 表面)スチール、(その他)ナイロン樹脂・ポリウレタン樹脂 マット：(表面)ポリエステル樹脂 (吸着部分)アクリル樹脂				
JANコード	4979652620682	4979652620668	4979652620675	4979652620699	4979652620705
TAISコード	00055-000314	00055-000315	00055-000316	00055-000317	00055-000318

●サムリング本体とオプション品セット

ベッドでとまるくん (CKM-CK)セット					
品番	CKM-02 SET GR + CKM-CK	CKM-02 SET DGR + CKM-CK	CKM-02 SET BR + CKM-CK	CKM-02 SET B + CKM-CK	CKM-02 SET G + CKM-CK
質量	(本体)17.5 kg + (ベッドでとまるくん)670 g				
材質	本体：アルミ合金、ゴム ツマミ：プラスチック、ステンレス 六角穴付きねじ：ステンレス				
TAISコード	00055-000320	00055-000321	00055-000322	00055-000323	00055-000324

ベッドでとまるくん (CKM-CK)セット					
品番	CKM-04 SET GR + CKM-CK	CKM-04 SET DGR + CKM-CK	CKM-04 SET BR + CKM-CK	CKM-04 SET B + CKM-CK	CKM-04 SET G + CKM-CK
質量	(本体)18.0 kg + (ベッドでとまるくん)670 g				
材質	本体：アルミ合金、ゴム ツマミ：プラスチック、ステンレス 六角穴付きねじ：ステンレス				
TAISコード	00055-000326	00055-000327	00055-000328	00055-000329	00055-000330

●製品の仕様等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

矢崎化工株式会社

■本社 福祉介護機器部
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

■北海道支店
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

■東京支店
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL 04-2944-7113 FAX 04-2944-7007

■名古屋支店
〒484-0963 愛知県大山市宇鶴池48-2
TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219

■九州支店
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL 0948-72-0310 FAX 0948-72-4026

■仙台支店
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

■神奈川支店
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4
TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

■大阪支店
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL 072-672-8440 FAX 072-673-8822

介護支援ページ
kaigo-web

<http://www.kaigo-web.info/>



お問い合わせ先

23072307

DW-303-00